

INSTRUCTIONS FOR USE all Food:

This sampling kit is a send-in kit for the measurement of food specific IgG antibodies in human **capillary sample**. The sample is analysed in vitro in a specialized diagnostic laboratory.

Content of sample sampling kit:

Material for sampling (sample sampling pouch)

- 1 alcohol wipe
- 1 band aid
- 1 swab
- 1 collection tube
- 1 transport tube
- 2 lancets

1 Strip with two Test ID / QR code labels

Written Material

1 Patient form

1 Instructions for use

Please note:

- Please read the Instructions carefully before you begin.
- If you have difficulties drawing sample or if the kit is incomplete, you can contact our customer service team with complete confidence.

Warnings:

- Keep the kit out of reach of children.
- kit may only be used by adults over the age of 18.
- If you have a congenital or acquired sample clotting disorder or take anticoagulant medication, use the kit only after consulting your doctor.
- The kit and especially the sterile lancets are exclusively for your own use and may only be used once.
- If you have problems regarding the sight of or the taking of sample, take the sample only in the presence of another person.
- Any serious incident that has occurred in relation to the use of this kit shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which you are living.

Do not use the kit, if you have a sample-borne disease, e.g. Hepatitis or HIV!

Instructions:


1. [to be done: picture of patient form]

Before you start, you need to fill in the patient form. Your test kit contains two stickers with your unique test-ID and a QR code. Place one sticker on the patient form.

2. If you have cold hands, wash your hands in hot water for about a minute. Dry your hands. Additionally, you may swing your arm in circles for 10 times. Both actions will increase sample circulation in your fingers.




3. Wipe your middle or ring finger to be punctured with the alcohol wipe. Wait a few seconds until the finger is completely dry.

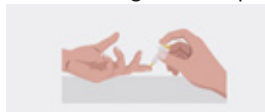


4. Remove the protective cover of the lancet by rotating and pulling.

CAUTION: Do not use a lancet with a loose or missing protective cover.

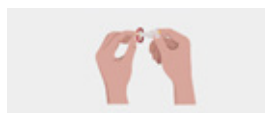

5. Place your hand on a flat surface. Put the lancet to the side of your finger tip and press the lancet firmly against the finger, until the lancet needle is released. **CAUTION:** the lancet will only release once.

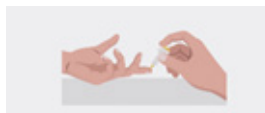


6. We recommend that you stand up at this stage to let the sample in your arm flow downward. Help the sample drops come out by massaging the finger toward the needle puncture.



7. Open the collection tube by removing the cap. Transfer the sample drops into the test tube until the sample reaches the marked line. Standing up will help with sample flow. Close the cap after finishing.




8. It is **very important** that you fill up the tube to the marked line, otherwise the lab will not be able to complete the test. Use the extra lancet if you need to puncture another finger.

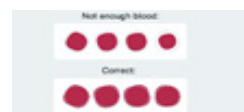

9. Place the sticker with your unique test-ID on the collection tube. Place the collection tube inside the transport tube and close it.



10. When the sample has dried for 2 hours, put the paper in the plastic cover it arrived in.

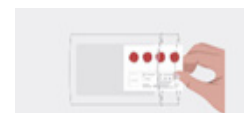


11. Using a return envelope supplied by your sales agency, the sample will be send to the laboratory.



Icon explanation:



Consult instructions for use.

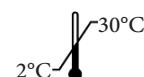

Storage between 2°C - 30°C.



Use by.



Caution.



Article number.



Do not reuse



Batch.



Manufacturer.



Content sufficient for <1> test.



In-vitro diagnostics.



CE Marking of conformity.



GA Generic Assays GmbH,
Ludwig-Erhard-Ring 3, 15827
Blankenfelde-Mahlow OT
Dahlewitz, Germany.



GA Generic Assays GmbH
Ludwig-Erhard-Ring 3
15827 Blankenfelde Mahlow / OT Dahlewitz
GERMANY
t: +49 33708 9286 0 - +49 1723993687
info@genericassays.com
www.genericassays.com
Trade registry HRB 16038
District court Potsdam



Medipan GmbH
Ludwig-Erhard-Ring 3
15827 Blankenfelde Mahlow / OT Dahlewitz
GERMANY
t: +49 33708 4417 32 - t: +49 33708 4417 25
s.landau@medipan.de
www.medipan.de
Trade registry HRB 6195
District court Potsdam



King Abdulla District Building no. 8178 East
ring road sub. 12424 -4352
Email: info@hmc.health
Saudi Arabia
Phone: + 966112416899
Fax: +966112708255
www.hmc.health

هذا المنتج عبارة عن مجموعة تعمل على قياس عامل الحساسية من خلال قياس الصادات المسببة لعامل الحساسية والتي تستعمل في المختبرات.

محتويات العلبة:

- مسحة كحولية.
- علبة.
- مسحة.
- شريحة الفحص.
- إبرة وخز.
- لاصق لكتابة معلومات المريض.
- ورقم الهوية ومربع المسح الضوئي.
- ورقة بيانات المريض.
- ورقة دليل الاستعمال.

ملاحظة:

- الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل البدء بالإستعمال
- إذا كان هناك أي صعوبات لأخذ العينة الرجاء الإتصال بشخص مختص للمساعدة.
- لضمان جودة النتيجة والتأكد من صحة العينة التأكد من الكمية الكافية للعينة.

تحذيرات:

- حفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- الاستعمال من قبل أشخاص فوق 18 سنة.
- إذا كان هناك أية أعراض جانبية لأخذ العينة لابد من استشارة الطبيب.
- جميع أجزاء المجموعة الخاصة بالاستعمال واخذ العينة هي للاستعمال الشخصي ولمرة واحدة فقط.
- في حال وجود أي صعوبة بأخذ العينة الاستعانة بشخص آخر.
- في حال وجود أي اختلافات الاتصال بالمصنع أو خدمة العملاء.


التعليمات:

1. قبل بدء الاستعمال يجب تعبئة النموذج الخاص بمعلومات المريض، ووضع اللاصقات في مكانها المحدد.


2. إذا كان هناك برودة الأطراف اغسل اليدين بماء دافئ لتحسين حركة الدورة الدموية لمدة دقائق في الأطراف.




3. امسح مكان اخذ العينة ومسح الاصبع وتعقيمه بالمسحة الكحولية الخاصة والانتظار حتى الجفاف الكامل.

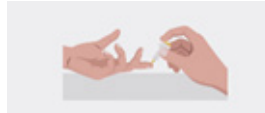

4. انزع غطاء واخذ اخذ العينة عن طريق التدوير ثم السحب وتأكد من سلامة الغطاء قبل الاستعمال.

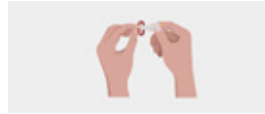

5. ضع الواخز عند الاصبع مباشرة واضغط على الزر المخصص وانتظر حتى تعود الإبرة لمكانها.

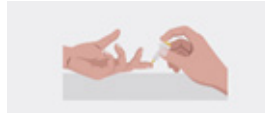


6. يفضل الوقوف لزيادة تدفق العينة.



7. امسح الأماكن المخصصة للعينة بشكل كامل.



8. من الضروري جداً تعبئة الأنبوب بالعينة حتى الخط المحدد، وإلا لن يستطيع المخبر إتمام التحليل. يمكنك استخدام الواخز الثاني لوخز إصبع آخر لتعبئة كامل العينة.

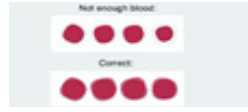

9. ضع اللاصق الخاص بالمريض على حامل العينة.



10. عند جفاف العينة ضع حامل العينة في الظرف البلاستيك خلال ساعتين من اخذ العينة.



11. ارسال العينة للشخص المعني او المكان اللازم لعمل التحليل.

